

En nem opgradering, der sparer ventetid, unødvendige opkald og masser af skridt

Du ønsker at give en person en vigtig besked, men linien er konstant optaget. Løsningen på denne problemstilling hedder NetPage og sikrer fuld tilgang til information uanset hvem du er eller hvor du er. NetPage er en opgradering af hospitalets eksisterende

de trådløse system fra Ascom og udnytter hospitalets intranet, så der kan sendes præcise og fyldestgørende tekstbeskeder fra enhver PC til person-søgere og trådløse telefoner. Beskederne kommer igennem til displayet øjeblikkelig. Fordelene ved at

give hurtige, præcise beskeder er indlysende for mange personalegrupper – og vil spare masser af skridt, unødvendige opkald og frem for alt ventetid i mange situationer.



Lægen:

Kan bruge tiden mere effektivt på patienterne ved at få præcise beskeder i rette tid. Kender beskedens vigtighed og behovet for handling. Kan kvittere* for beskeden – spare anden tilbagemelding – og handle umiddelbart.



Sekretæren:

Sparer tid og telefonopkald, fordi der ikke skal tjekkes/dobbelttjekkes, om beskeder vedr. patienter og information om f.eks. møder når frem til de rette modtagere.



Elektrikeren:

Sparer mange unødvendige skridt. Kan få præcis besked om, hvad der skal klares – og hvor presserende opgaven er. Muligheden for lange, fyldestgørende beskeder gør tilbagekald unødvendige.



Portøren:

Undgår mange overflødige skridt. Kan modtage præcise beskeder om hvor han skal gå hen – og komme videre med sit arbejde – uden at returnere til centralen.



Sygeplejersken:

Får frigjort mere tid til patienterne. Er sikker på at alle beskeder kommer igennem. Skal ikke følge op – eller afvente, at der ringes tilbage.



IT-supporteren:

Kan yde bedre service til alle afdelinger. Kan hurtigt få at vide, hvor problemet er – hvad det omhandler – og hvor høj prioritet, det har og handle derefter.




Enkel teknisk løsning med Linux server

NetPage er en applikation på en embedded Linux server med fast IP-adresse, der kobles på hospitalets intranet eller LAN. Herefter kan brugere af enhver opkoblet PC sende

tekstbeskeder fra en almindelig web-browser. På den enkle brugerflade er der bl.a. mulighed for at oprette tidsbesparende modtagerlister, forskellige grupper af modtagere – og prædefi-

nerede beskeder, der bruges hyppigt. Derudover kan brugerfladen kundetilpasses.

► Person søgere og trådløse telefoner rykker på intranettet og bli'r til NetPage.

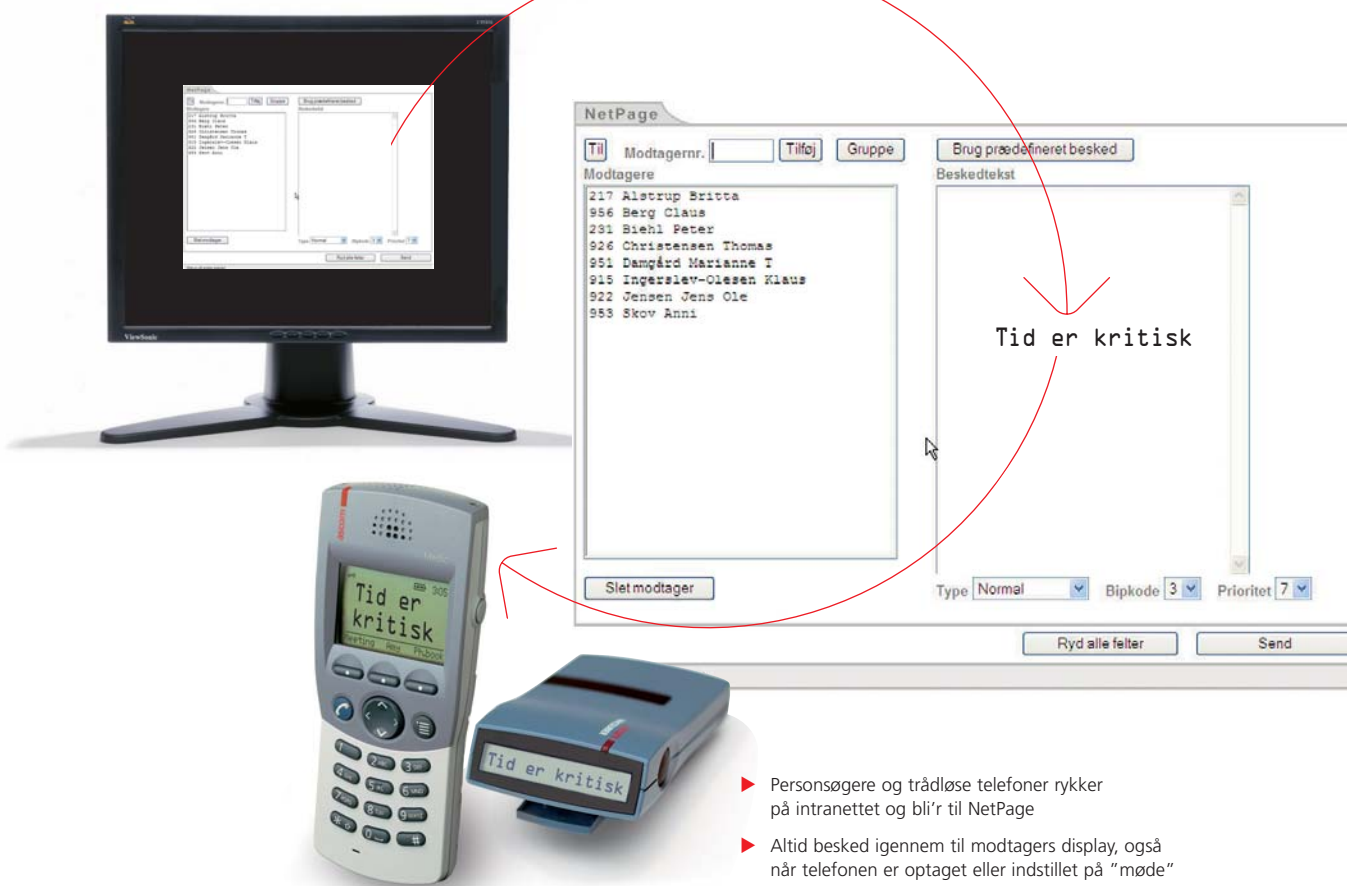

- Person søgere og trådløse telefoner rykker på intranettet og bli'r til NetPage
- Altid besked igennem til modtagers display, også når telefonen er optaget eller indstillet på "møde"
- Mulighed for præcise tekstbeskeder
- Mindst 120 karakterer - tekstbeskeder lange nok til specifikke patientoplysninger
- Biptoner signalerer vigtighed
- Mulighed for gruppebeskeder
- Let at sende beskeder fra enhver PC på intranettet
- Mulighed for kvittering* for modtaget/set besked

Ascom Danmark A/S

Tåstrup Afd.
Roskildevej 342C
DK-2630 Tåstrup
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

Silkeborg Afd.
Ørstedvej 9
DK-8600 Silkeborg
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

info@ascom.dk
www.ascom.dk

* Kvitteringsfunktionen kræver en 2-vejs person søger eller minimum en Ascom 9d Messenger telefon

ascom